

# Portable pH Meter PH8500

휴대용 pH / ORP(mV) / 온도 측정기



## Portable pH meter PH8500


- pH / ORP(mV) / 온도 측정
- 데이터 500개 저장 및 PC로 다운로드 가능
- 최대 3점 자동 보정 및 커스텀 (사용자가 원하는 농도) 2점 수동 보정 가능
- Buffer 종류 선택하여 보정 진행 가능 (USA / NIST 중 선택)
- 데이터 안정시 😊아이콘으로 쉽게 확인
- 자체진단 기능을 갖추고 있어 기기의 이상 유무를 판단
- 기기 커넥터에 방수, 보호캡 마개 장착
- 기기 본체가 고무커버로 되어 보호 및 미끄러짐 방지
- IP57 방수,방진 등급
- 화이트 백라이트 LCD로 어두운 곳에서도 측정 가능
- 간편하게 들고 다닐 수 있는 이동 가방 제공
- 간이측정기 성능인증 1등급 제품



제조원 : 미국 Apera Instruments



[ Full set 구성 ]

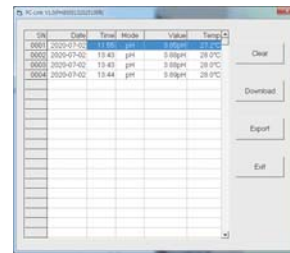

[ PC 연결 화면 ]

모 델	Portable pH meter PH8500		
측정 항목	측정 범위	정확도	분해능
pH	-2.00 ~ 16.00 pH	±0.01 pH ±1digit	0.01 / 0.1 pH
ORP (mV)	±1999 mV	±0.1% FS ±1digit	0.1 mV (@±200mV) 1 mV (@±200mV 초과)
온 도	-10 ~ 110 °C	±0.5 °C ±1digit	0.1 °C
데이터 저장	500개 저장 (시리얼, 날짜, 시간, 측정값, 측정단위, 온도)		
출력 / IP등급	USB 케이블로 PC에 연결 / IP57		
전 원	AA 배터리×3 (1.5V×3)		
크기 / 무게	기기 : 86 x 196 x 33 mm / 335g 휴대용 가방 : 330 x 270 x 82 mm / 1.3kg		
구 성 품	기기, pH(온도복합)전극, 보정용액 kit (pH 4.00, 7.00, 10.01 각 50ml 씩) USB 데이터 케이블, PC용 소프트웨어, 드라이버, 휴대용 가방, 매뉴얼		